

# ium

# SPEED SHOT

## イウム スピードショット

### 取扱説明書 保証書付

品番 **IUM-SS-K**

**家庭用**

### もくじ

ページ

安全上のご注意 .....	P1~5
各部のなまえ .....	P6~7
ご使用の前に .....	P8
ご使用前の準備とご注意 .....	P9~11
お手入れできる部位 .....	P12
照射時の痛みを減らすには .....	P13
使いかた (基本) .....	P14
使用する .....	P15~17
お手入れのしかた .....	P18
よくある質問 .....	P19~20
故障かな?と思ったら .....	P21
製品仕様 .....	P22
保証書 .....	裏表紙



このたびは「イウム スピードショット」をお買い上げいただきありがとうございます。  
この取扱説明書は、本製品使用上の注意事項および警告事項について詳しく記載しています。  
本製品をご使用の前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分に理解されたうえで事故  
が起これぬように、記載内容に従って正しくご使用ください。本製品は家庭用に開発された製品です。  
事故や故障の原因になりますので、業務用としては絶対に使用しないでください。また、一度お読みにな  
ったあとも必要時にいつでも確認できるように、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。  
製品改良のため、予告なしにデザイン・仕様を一部変更する場合があります。あらかじめご了承ください。  
※効果・刺激の感じかたには、個人差があります。取扱説明書をよくお読みになってから正しくご使用ください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



## 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



## 注意

人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「禁止」(しないでください)を示します。



記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

### 安全にご使用いただくために

- ①取扱説明書に記載されていない方法や、用途以外の目的でのご使用は、事故やけがの原因となります。絶対におやめください。
- ②お客様の不注意による破損・けがに対する責任は負いかねますのでご了承ください。
- ③故障していたり、故障と思われる場合は、ご使用にならないでください。
- ④取扱説明書のガイドライン、指示が守られない場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ⑤本製品はおもちゃではありません。
- ⑥身体の不自由な方の一人での使用や、子供に使用させないでください。

## 警告

### 以下のような医用電子機器を使用している人は、使用しない

- ・心臓ペースメーカーなどの体内埋め込み型医用電気機器
- ・人工心肺などの生命維持用医用機器
- ・心電計などの装着型医用機器
- 事故・体調不良の原因になります。

### 以下のような人は使用しない

- ・皮膚知覚障害のある人、自分で意思表示できない人
- ・皮膚癌の既往がある人、ほくろやシミが異常に多い人
- ・アトピー、湿疹など、皮膚疾患のある人
- ・局部または全身に炎症のなどの皮膚疾患のある人
- ・敏感肌・アレルギー体質・かぶれやすい体質の人
- ・太陽光により肌荒れや皮膚疾患を起こしやすい人
- ・光過敏症を引き起こす医薬品またはステロイド剤を常用、あるいは一週間以内に服用した人
- ・糖尿病などの疾患により、皮膚や感覚に異常のある人
- ・飲酒後や薬を服用中の人
- ・てんかんのある人
- ・成長期のお子様（18歳未満の人が使用する場合は、保護者が正しい使いかたや、警告・注意・禁止事項を指導する）
- ・妊娠中・授乳中の人
- ・かかりつけ医に本製品の使用を禁止された人
- ・体調の優れないときや、肌・身体に異常を感じる時
- 皮膚疾患・やけど・事故の原因になります。



禁止

# 警告



分解禁止

**絶対に改造、分解、修理をおこなわない**

- 火災・感電・けがの原因になります。
- ※修理はお買い上げの販売店またはお客様サポートセンターにご相談ください。



ぬれ手禁止

**ぬれた手でACアダプタやジャックの抜き差しをしない**

- 感電・やけど・けがの原因になります。



浴室使用禁止

**浴室やシャワーの近くなどの高温・多湿な場所や水のかかる場所では使用しない**

- 感電・火災・故障の原因になります。



水ぬれ禁止

**水にぬらしたり、水洗いはしない  
湿気の多い所、ぬれるような所に置かない**

- ショートによる感電・事故の原因になります。

**業務用や使用目的以外に使用しない  
室内のみで使用し、屋外では使用しない**

**日本国内専用  
家庭用**

**専用のACアダプタ以外は使用しない**

- 火災・感電の原因になります。

**本製品のACアダプタを他の機器に使用しない**

- 火災・感電の原因になります。

**家庭用コンセント以外では使用しない**

- 火災・感電の原因になります。



禁止

**ACアダプタの電源コードを傷つけたり破損しない**

無理に曲げる、引っ張る、ねじる、傷つける、挟み込む、重い物をのせるなどしないでください。

- 火災・感電・ショート・故障の原因になります。

**傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わない**

- 火災・感電の原因になります。

**使用中のACアダプタを布団でおおったり、包んだりしない**

- 熱がこもり、ケースが変形して火災の原因になります。

**本体のすき間や開口部から物などを入れない**

- 感電・けがの原因になります。

**本体の吸気口・排気口をふさがない**

- 火災・やけどの原因になります。

## 警告

直射日光の当たる場所で使用したり、放置したりしない

●故障の原因になります。



禁止

身体の不自由な方の一人での使用や、子どもに使用させない

●けが・事故の原因になります。

乳幼児にACアダプタをなめさせたり、おもちゃにしない  
また、子供の手の届く所に置いたり、保管しない

●事故・けが・感電の原因になります。

異常・故障時には、ただちに使用を中止し、ACアダプタを  
コンセントから抜く

●発煙・火災・感電のおそれがあります。

〔異常例〕

- ・異常な音やにおいがする
- ・ACアダプタの電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・ACアダプタの本体や電源コードが異常に熱くなる
- ・使用中ときどき電源が切れる
- ・触れるとビリビリと電気を感じる
- ・電源コードに傷がある

※使用を中止し、お買い上げの販売店、またはお客様サポートセンター  
へお問い合わせください。



必ず守る

使用後は必ず ACアダプタをコンセントから抜く

●感電・けがの原因になります。

お手入れや点検、移動の際は必ず ACアダプタをコンセントから抜く

●感電・けがの原因になります。

ACアダプタのプラグはコンセントの奥まで確実に差し込む


●ショートによる感電・火災の原因になります。

ACアダプタのプラグのゴミやホコリは定期的に取り除く

●湿気などで絶縁不良になり、感電・火災の原因になります。

コンセントから ACアダプタを抜くときや  
本体からジャックを抜くときは、  
電源コードを持たずに、ACアダプタ  
やジャックを持って引き抜く

●電源コードが破損し、感電・火災  
の原因になります。

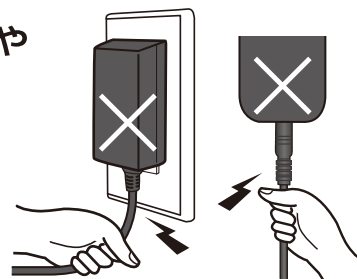

## ⚠ 注意

### 以下のような部位には使用しない

- 日焼けした肌、過去 4 週間以内に強い日差しに当たったり日焼けマシーンを使用した肌
- 付属のスキンチャートの使用不可の肌色にあたる方
- ほくろや刺青、アートメイクがある部位およびその周辺
- 皮膚疾患のある部位 (かさぶた、傷、湿疹、あざ、いぼ、たむし、吹き出もの、かぶれ、虫刺され、皮膚がん、毛嚢炎、血管腫など)
- 静脈瘤、血管奇形のある部位
- 美容整形、手術を受けた部位、傷跡の残っている部位
- 唇、目の周り、眉周り、耳、頭
- 乳首、乳輪、へそ、のど
- 大陰唇 (女性) 以外の性器、男性器、肛門、粘膜

### 暗褐色の肌の人は無理に使用しない

- 肌の色の濃い人が無理に使用すると、やけどなどの原因になります。

### 体調不良や肌の異常を感じる時は、使用しない

- 体調不良・皮膚疾患の原因になります。



禁止

### 1 回の使用で同じ部位に何度も照射しない

- やけどなどの原因になります。  
同じ部位に重ねて照射しないように、直線上にずらしながら照射してください。  
※ 同じ箇所に繰り返し照射しないでください。  
※ 使用頻度の目安 (8 ページ) 以上の頻度で照射しないでください。

### 30 分以上の連続使用をしない

- 30 分使用後は一度電源を切り、10 分後、電源を入れて使用を再開してください。

### 使用前に、使用部位をアルコールなどの引火性の液体で拭いたりしない

- 発火のおそれがあります。

### 引火性のもの (アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど) の近くで使用しない

- 発火・爆発の原因になります。

### 衣類や髪の毛に照射しない

- 焦げ・変色の原因になります。

### 暗い部屋や周囲に人がいる場所、とくに子供の近くで使用しない

- 照射時の光りが強いため、目を痛める危険性があります。

### 照射前に必ず除毛する

- 黒い物 (色) に強く反応するため、やけどの原因になります。

### 素肌 (化粧や日焼け止めなどを洗い流した状態) に使用する

- 肌トラブルの原因になります。

## 注意



禁止

### 照射時に光りを直視しない

- 目を痛める原因になります。

### 照射面を皮膚に強く当てすぎない

- やけどを負うおそれがあります。

### 照射直後に照射面（ガラス）に触らない

- やけどの原因になります。

### 家族や他人との共用はしない

- 感染症の感染・炎症の原因になります。

### 顔に使用するときには、必ず付属のサングラスを着用する 顔以外でもまぶしいと感じたときは、付属のサングラスを着用 してお手入れをおこなう

- 目を痛める原因になります。

### 照射面の破損や変形、異常がないことを確認してから使用する

- けが・やけどの原因になります。

### はじめて使用するときには、照射レベル 1（弱）から始める

- 痛みやトラブルがないことを確認し、次に使用するときには照射レベルを 1 つ上げるようにして、徐々に強くしてください。長期間使用しなかった後で使用するときも、はじめての使用と同じように照射レベル 1（弱）から始めてください。



必ず守る

### アクセサリなどの金属類は外して使用する

- けが・事故の原因になります。

### 次のような場合は、医師に相談する

- 肌のトラブル・疾患の悪化の可能性があります。
  - ・本製品使用に不安のある人
  - ・薬を服用している人
  - ・本製品を使用して肌に炎症やトラブルが出た人

### お手入れ後は、2 週間程度お手入れした部位を日光にさらさない ようにし、直射日光を避ける

- やけど・炎症の原因になる可能性があります。

### 環境温度が約 15℃～35℃の中で使用する


- 使用推奨温度外では動作しないことがあります。

### 子供の手の届かない所に保管する

- けが・事故の原因になります。


# 各部のなまえ

## 本体

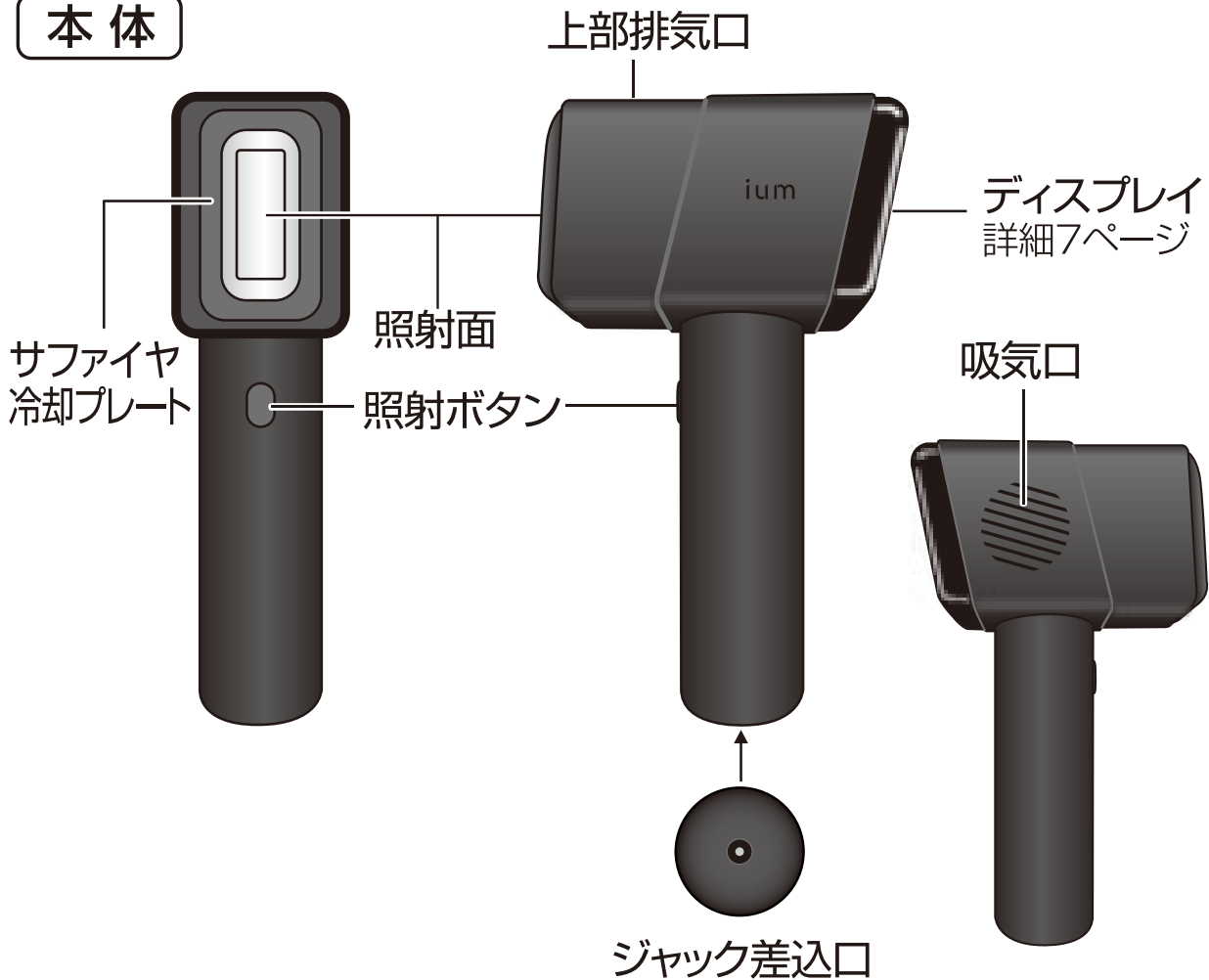


## 付属品

### ■ACアダプタ

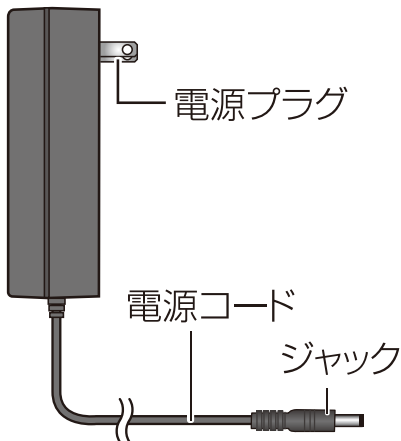

### ■VIOアタッチメント ※詳細7.16ページ

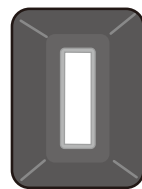

マグネットで本体照射面に簡単に脱着できます。

### ■サングラス

顔に使用するとき、光りがまぶしいときに着用する




使用後は、必ずコンセントからACアダプタを抜く  
必ず守る →感電・火災の原因になります。



電源コードは、束ねたまま使用しない  
禁止 →コードが熱くなり、故障・火災の原因になります。

※7ページに続く


## 《ディスプレイ表示の説明》

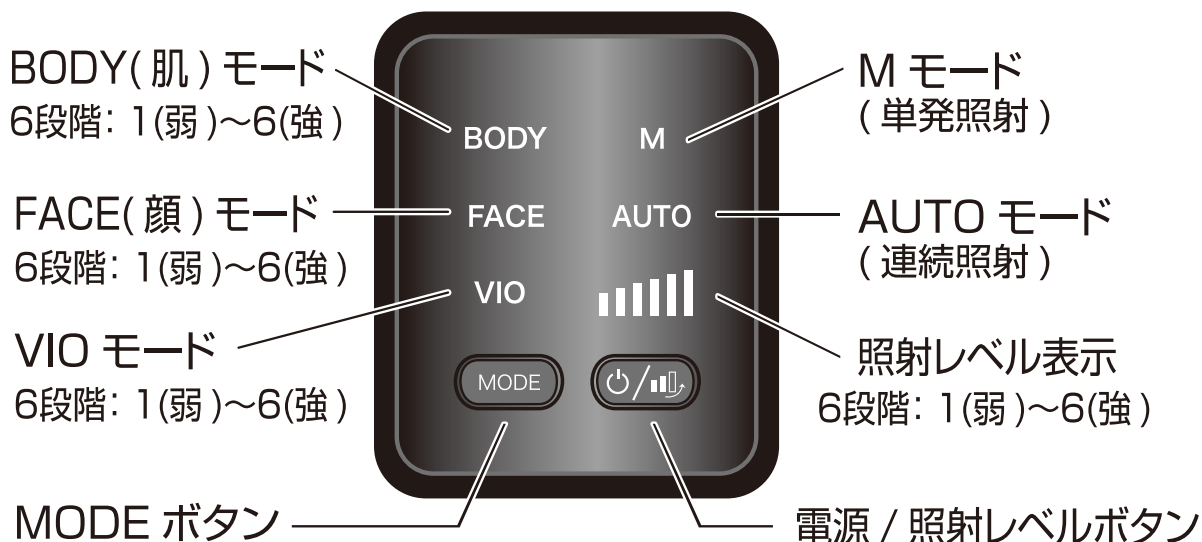

**注意** 照射ボタンを押している状態ではボタンが反応しません。

電源 / 照射レベル ボタン	長押しで電源 ON/OFF 短押しで照射レベル 1→2→3→4→5→6 の繰り返し
MODE ボタン	短押しで BODY→FACE→VIO の繰り返し
M (単発照射)	照射ボタン短押し
AUTO (連続照射)	照射ボタン長押しで AUTOモード (連続照射) に切り替え ※無操作で約3分経つと Mモード (単発照射) に切り替わります。 ※再度照射ボタンを長押しすると Mモード (単発照射) に切り替わります。
VIO	VIOアタッチメントを取り付けると、自動で VIOモードに切り替え ※VIOアタッチメントを取り外すと BODYモード1・Mモード (単発照射) に切り替わります。 ※VIOアタッチメントを取り付けているときは VIOモード以外のモードは選択できません。 ※VIOアタッチメントを取り付けずに MODEボタンで選択することも可能です。

## 《VIOアタッチメントの用途》

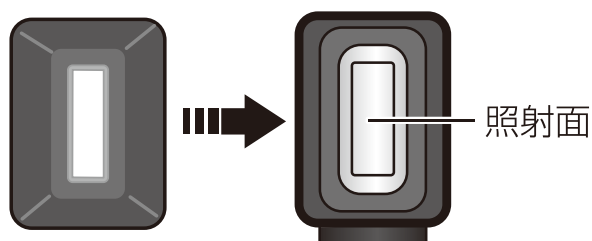

衛生面が気になる場合に使用

詳細:12ページ

本体照射面の位置に合わせて  
取り付けると、自動的にVIOモード  
に切り替わります。

※VIOアタッチメントを装着して使用する場合はサファイヤ冷却が働きません。



## ご使用前に



### 使用上の注意

- 使用前に本体に異常がないか確認する
- 暗い場所では使用しない
- 周囲に人がいないことを確認する

### ■照射テストのしかた

初めて使用するときや、しばらく使用しなかったとき、照射レベルを上げるときは、肌トラブルが起きないかを事前にチェックしてください。照射テストは、12ページのお手入れできる部位の中で、使用する部位ごとに照射テストをおこなってください。

※使用上の注意・使用手順は8～17ページを参照してください。

- 照射レベルを1(弱)にして、使用したい部位(12ページ)に1回照射します。

2日後



- ◎ **肌に異常がない** → テストした照射レベルで使用できます。

※照射レベルを上げる場合は、1レベルずつ上げて、照射テストをおこなってください。

### × 肌に強い痛み、赤みが発生し、2日以上続く

- 照射レベル1の場合 → 使用を中止し、肌を冷却・保湿してから皮膚科医に相談してください。
- 照射レベル2以上の場合 → テストした照射レベルで使用できません。照射レベルを下げてご使用ください。

※照射テストで肌に異常がなかった場合でも、体質や体調によっては肌が一時的に赤くなったり、痛みを生じることがあります。その際は2日ほど様子を見てください。

- 本製品によるお手入れは、使用頻度の目安を参考におこなってください。

※体毛の成長周期には個人差があります。

※その後は肌や毛の具合を見ながら、気になり始めたら定期的にお手入れをおこなってください。

《使用頻度の目安》以下の推奨使用頻度を目安にご使用ください。

#### ●ボディ・顔・VIO

使用時期	推奨使用頻度
最初の2か月	1週間に1回
3か月以上	4～8週間に1回
しばらく使用しなかったとき	1週間に1回

#### ●男性のヒゲ

推奨使用頻度
3日に1回

## ご使用前の準備とご注意

**!** 本格的な使用前に必ずおこなってください。

■**照射部位の肌の準備** ※本製品には除毛機能はありません。

●必ずお手入れする部位の体毛を、カミソリや電気シェーバーで事前に剃ってください。

※深剃りはせず、前日に毛並みに沿って処理をしてください。  
ワックスやピンセットを使って体毛を完全に抜いた状態の肌に使用した場合、照射の効果がみられず肌を痛めるおそれがあります。

除毛しないまま使用すると、やけどの原因になります。

●化粧品 (制汗剤・化粧水・クリーム・香水なども含む)をよく洗い流してしっかり乾かしてください。

※お手入れする前にローション・クリーム・オイルなどを使用しないでください。  
肌を痛めるおそれがあります。

●ほくろ・いぼ・しみ・そばかす・あざなどは、ばんそうこうなどでカバーして、光りが当たらないようにしてください。

- アクセサリーなどの金属類は外す
- 光りがまぶしいときや、顔に使用するときには付属のサングラスを着用する
- 入れ墨およびアートメイクのある部位には照射しない
- 目に照射しない
- 12ページのイラストで示したお手入れできる部位以外には照射しない
- 成長期のお子様は使用しない  
※18歳未満の人が使用する場合は、保護者が正しい使いかたや、警告・注意・禁止事項を指導する
- 体調不良や肌の異常を感じる時は使用しない
- 褐色の肌の人は無理に使用しない



**注意**

ムダ毛を目立たなくする効果を感じにくい場合でも  
使用頻度の目安 (8 ページ) 以上の頻度で照射しない

→肌を傷つけたり、炎症・痛みの増加などのトラブルや、  
症状悪化の原因になるおそれがあります。

## ⚠ 注意

### ●以下のような人は使用しないでください。

- ・皮膚知覚障害のある人、自分で意思表示できない人
  - ・皮膚癌の既往がある人、ほくろやシミが異常に多い人
  - ・アトピー・湿疹など、皮膚疾患のある人
  - ・局部または全身に炎症など、皮膚疾患のある人
  - ・敏感肌・アレルギー体質・かぶれやすい体質の人
  - ・太陽光により肌荒れや皮膚疾患を起こしやすい人
  - ・光過敏症を引き起こす医薬品またはステロイド剤を常用、あるいは一週間以内に服用した人
  - ・糖尿病などの疾患により、皮膚や感覚に異常のある人
  - ・飲酒後や薬を服用中の人
  - ・てんかんのある人
  - ・成長期のお子様  
(18歳未満の人が使用する場合は、保護者が正しい使いかたや、警告・注意・禁止事項を指導する)
  - ・妊娠中・授乳中の人
  - ・かかりつけ医に本製品の使用を禁止された人
  - ・体調の優れないときや、肌・身体に異常を感じるとき
- 皮膚疾患・やけど・事故の原因になります。

### ●次のような部位には使用しないでください。

- ・日焼けした肌、過去4週間以内に強い日差しに当たったり日焼けマシンを使用した肌
- ・付属のスキンチャートの使用不可の肌色にあたる方
- ・ほくろや刺青、アートメイクがある部位およびその周辺
- ・皮膚疾患のある部位(かさぶた、傷、湿疹、あざ、いぼ、たむし、吹き出もの、かぶれ、虫刺され、皮膚がん、毛嚢炎、血管腫など)
- ・静脈瘤、血管奇形のある部位
- ・美容整形、手術を受けた部位、傷跡の残っている部位
- ・唇、目の周り、眉周り、耳、頭
- ・乳首、乳輪、へそ、のど
- ・大陰唇(女性)以外の性器、男性器、肛門、粘膜

- 顔に照射するときは、必ず付属のサングラスをかけて、照射部位から目をそらしたり、目を閉じるなどして光りが目に入らないようにしてください。



禁止


- 電源コードは束ねたまま使用しない
- 浴室やシャワーの近くなどの高温・多湿になる場所で使用しない
- 水にぬらしたり、水洗いしない

お願い

ACアダプタは、2~3ページの「安全上のご注意」をよく読んで、正しく使用してください。

## 照射レベルについて

- 照射レベル表示ランプは、1(弱)～6(強)で肌に照射される光出力レベルの強さを表しています。  
照射レベルを高くすれば、お手入れの効果も高くなりますが、肌トラブルのリスクも高くなります。  
**はじめての使用時には、8ページの照射テストをおこない照射レベル1(弱)から始めてください。**
- 照射レベル1(弱)で使用して、お手入れ中・お手入れ後に不快感や肌トラブルがほとんどないようであれば、次回使用時に照射レベルを1つ上げてください。  
その後も同様にして、照射レベルを1つずつ上げてください。  
※レベルを上げる際は、その都度照射テストをおこなってください。
- 肌が濃い色の場合、メラニンが光りを吸収し、肌を傷つけてしまうことがあります。スキンチャートで使用できる照射レベルを確認してください。
- VIOゾーンは色素沈着により肌の色が濃い場合があります。必ず照射前にスキンチャートで確認してください。  
ご使用にあたっては、下記のスキンチャートを参考にして、ご自身の肌色に合った照射レベルで照射をおこなってください。

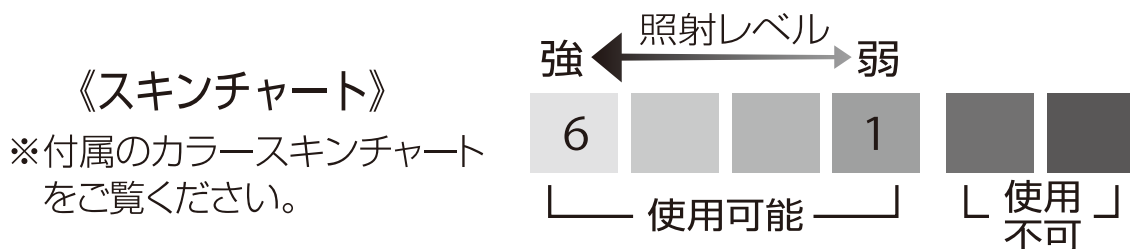

ご自身の肌にあった照射レベルよりも高い照射レベルで照射をおこなわないでください。

## 安全機能について

- 本製品には目を守るための「肌密着センサー」を搭載しています。  
照射面が肌にピッタリと密着していない場合は、照射ボタンを押しても照射面が発光しません。  
※連続照射モードのときは、肌に近づけると自動で発光しますが、十分な効果を得るためにも、必ず肌に密着させて照射してください。
- オートオフ機能を搭載しています。
  - ・約5分間操作をしなかった場合、自動的に電源OFFになります。
  - ・電源を入れてから約30分経過すると、自動的に電源OFFになります。

# お手入れできる部位


お手入れ前に必ず除毛してください。詳細 :9 ページ

## ！必ず守る

乳首、乳輪、へそ、のど  
には使用しない(下図)


短い髪は、クリップなどで固定し、  
使用部位に髪がかかる場合は  
束ねたり、ヘアバンドなどで  
固定してください。

顔および身体のグレーの  
部位のみに使用できます。

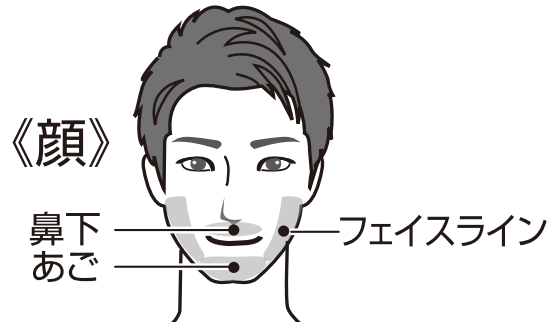

唇、目の周り、眉周り、  
耳、頭には使用しない

●顔に使用する場合は、事前に  
腕などの目立たない場所で  
テストをおこなってください。

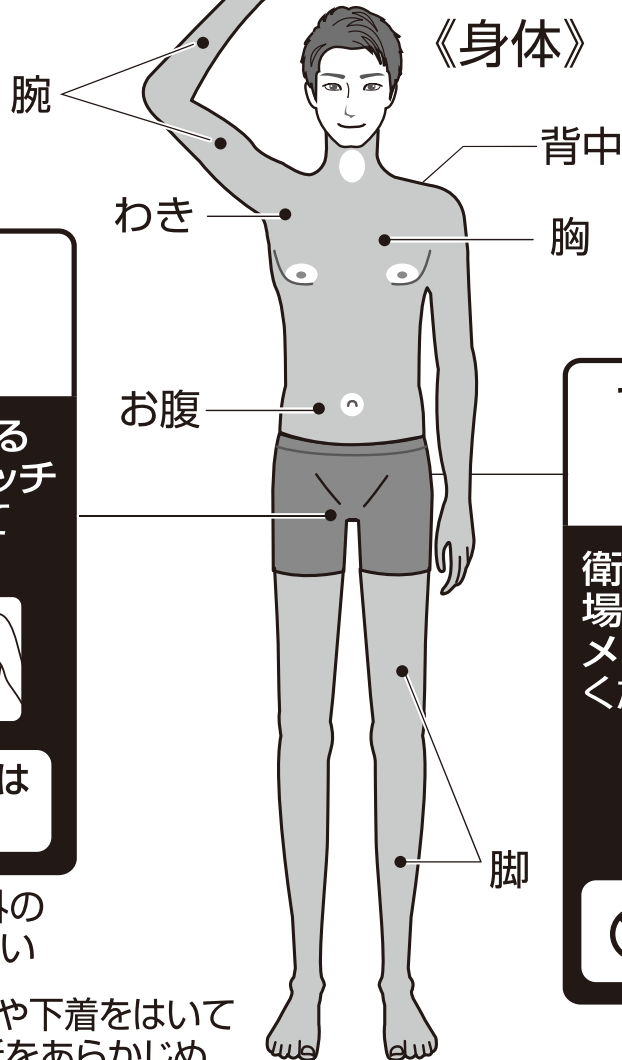

### V・Iゾーン

・陰部の周囲  
・脚のつけ根

衛生面が気になる  
場合はVIOアタッチ  
メントを使用して  
ください。



男性器・粘膜は  
使用禁止

- 女性は大陰唇以外の  
性器には使用しない
- Vゾーンは、水着や下着をはいて  
お手入れする箇所をあらかじめ  
確認してください。

### でん部(おしり) / Oゾーン

・肛門の周囲

衛生面が気になる  
場合はVIOアタッチ  
メントを使用して  
ください。



肛門・粘膜は  
使用禁止

## 照射時の痛みを減らすには


### ①冷凍庫に「保冷剤」を準備してください。

※保冷剤は、お客様ご自身で別途ご準備をお願いいたします。

### ②照射後、保冷剤で照射した部位を冷やします。

※痛み感覚には個人差があります。毛根が深くしっかりした毛は、痛みを感じやすくなります。

※皮膚の弱い部分や粘膜などには使用しないでください。

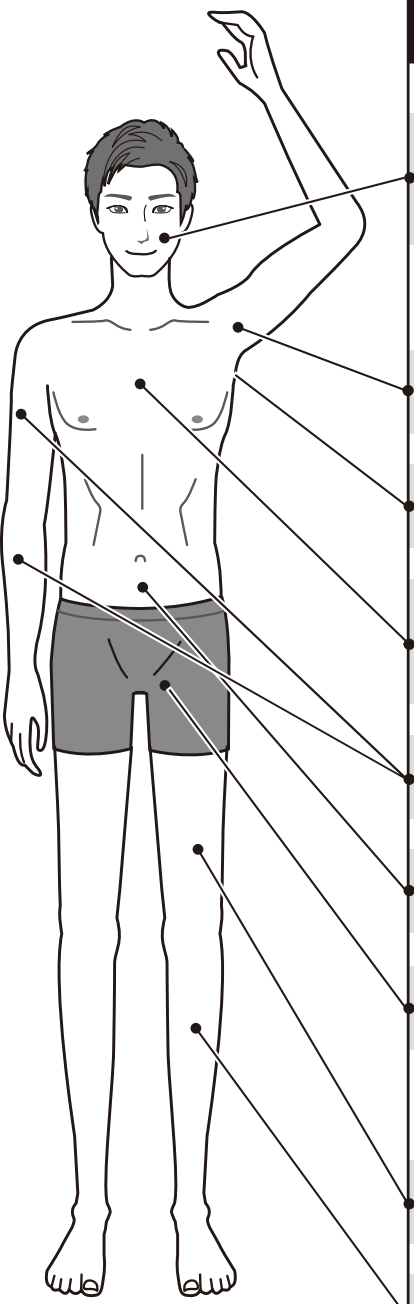

照射できる部位と 照射時に痛みを感じる部分	
部 位	痛 み
顔 (男性)	痛みを感じやすい
顔 (女性)	それほど痛みを感じない
顔は鼻下・あご・フェイスラインのみに照射できます。詳細:12 ページ	
わ き	痛みを感じやすい
背 中	それほど痛みを感じない
胸 (男性)	痛みを感じやすい
胸 (女性)	それほど痛みを感じない
腕	それほど痛みを感じない
お 腹	それほど痛みを感じない
VIO ライン	痛みを感じやすい
衛生面が気になる場合は VIO アタッチメントを使用してください。詳細:7.16 ページ	
太もも	それほど痛みを感じない
ひざ下	位置によっては痛みを感じる

## 使いかた(基本)

■電源を入れたときの初期設定は「BODYモード」「単発照射モード(M)」「照射レベル1」です。

■定格使用時間は、約 30 分です。

※電源ボタンを長押しすると電源 OFF になります。  
約 5 分間操作をしなかった場合、または電源を入れてから約 30 分経過すると自動的に電源 OFF になります。


※VIO アタッチメントを取り付けると、自動的に「VIO モード」に切り替わります。



### 単発照射モード (M)

●液晶画面に **M** が点灯しているときに照射ボタンを短押しすると **1 度だけ発光** します。

※顔や VIOゾーンなどのデリケートな部位や、ピンポイントに照射したいときにおすすめです。

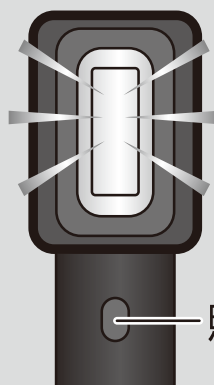


照射ボタン

### 連続照射モード (AUTO)

●照射ボタンを長押しすると、液晶画面に **AUTO** が点灯し、肌に近づけると自動的に連続で発光します。

※腕や脚など広い部位をスピーディーにお手入れできます。肌に押し当てたままゆっくり滑らせて照射します。

※単発照射モードにする場合は、照射ボタンを長押しすると液晶画面から AUTO が消えて M が点灯し、➡ 単発照射モードになります。

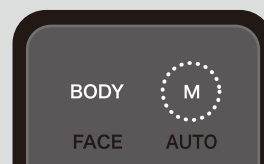

注意

肌に近づけると自動で発光するので、お手入れ部位以外の肌に誤って触れないようにする



必ず守る

- 顔に使用するときには、必ず付属のサングラスを着用する
- 衣服や髪の毛の使用しない
- 1回の使用で同じ部位に何度も使用しない
- 本体の吸気口・排気口をふさがない

本製品を使用して、肌に炎症やトラブルが出た場合は、医師に相談してください。  
お手入れ後乾燥が気になるときは、市販の保湿剤などで保湿してください。


# 使用する



浴室やシャワーの近くなどの高温・多湿な場所や水のかかる場所では使用しない

## 1 ACアダプタを接続する


- コンセントに ACアダプタを確実に差し込み、本体持ち手のジャック差込口にジャックを根元まで差し込み接続します。
- 液晶画面が一度点灯し、消灯します。

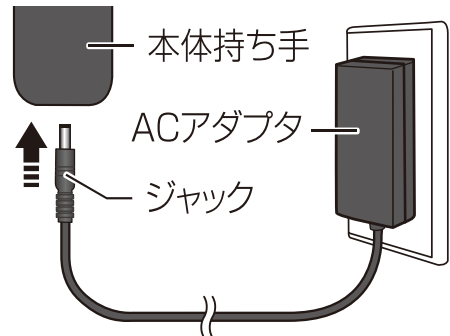

## 2 電源ボタンを長押しして電源を入れる

### 注意

照射ボタンに触れている状態ではボタンが反応しません。

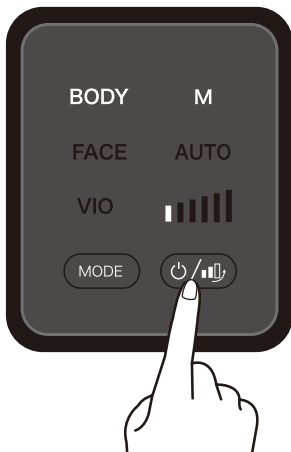

### ①液晶画面に初期設定


「照射レベル 1」「BODY」「M」の表示が点灯します。

※VIO アタッチメントを取り付けている場合の初期設定は「VIO」モードです

### ②サファイヤ冷却がはじまります。


※サファイヤ冷却プレートが冷えるまでには多少時間がかかります。サファイヤ冷却プレートが冷えてから使用してください。

※約 5 分間操作をしなかった場合に自動的に電源 OFF になります。

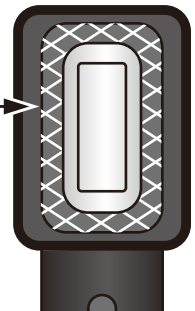

## 照射面を肌に密着させ垂直に当てる

- 肌にすき間なく密着し、照射可能な状態になると、液晶の「BODY」(選択しているモード)表示が点滅します。

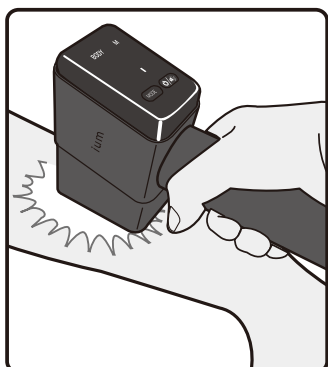

### ！ 必ず守る

はじめての使用時には、1(弱)の照射レベルから始めてください。

- ※肌に照射口が密着していないと発光しません。
- ※肌を伸ばしながら当ててください。





## 4 照射ボタンを押して（単発照射モード）照射面を発光させる

※連続照射モードは 14 ページ参照

●照射面が発光すると、肌が温かく、ややチクチクと感じられます。

**！必ず守る**      **同じ部位に何度も照射しない**

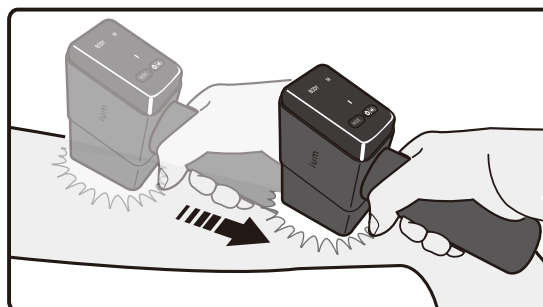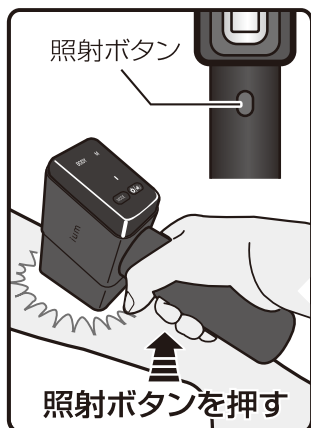


●照射面が重ならないようゆっくり滑らせながらすき間なく照射してください。

### 照射レベルを変える場合

●電源 / 照射レベルボタンを短押しして希望の照射レベルを表示させます。

※電源 / 照射レベルボタンを押すごとに照射レベルのバーが 1～6 まで変化します。

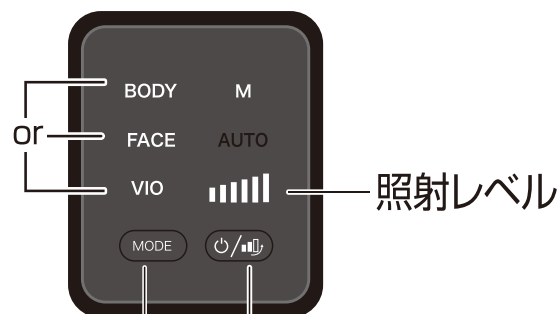

### モードを変える場合

●MODE ボタンを短押しして希望の出力モード **BODY** or **FACE** or **VIO** を表示させます。選択したモードが点灯します。

### VIOアタッチメントを使用する場合


●VIOアタッチメントを照射口に取り付けます。自動で **VIOモード** に切り替わり点灯します。

※VIOアタッチメントを装着して使用する場合は、サファイヤ冷却が働きません。


※VIOアタッチメントを取り付けているときはVIOモード以外のモードは選択できません。

※照射する部分の肌を手で伸ばしながら照射口を当て、内から外側に滑らせながら照射してください。

VIOアタッチメント

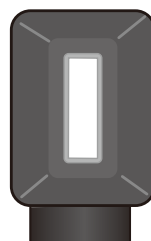

VIOモード →

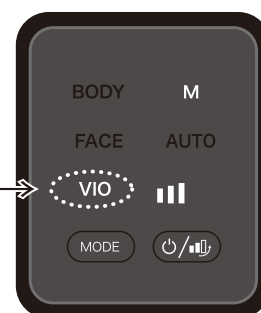


## 5 照射が完了したら、電源 / 照射レベルボタンを長押しして電源を切る

- ファンが約30秒間作動して電源が切れます。



使用直後は本体の照射面が高温のため、絶対に触らない  
→やけど・けがの原因になります。

## 6 コンセントから AC アダプタを抜き、本体からジャックを抜く

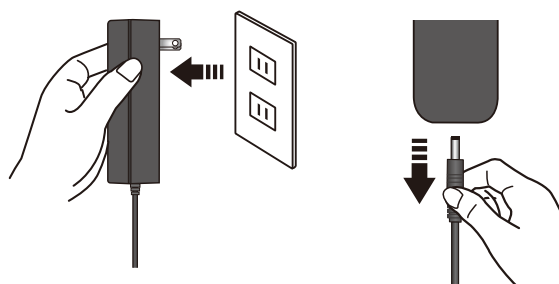

使用後、一時的に色素沈着する場合があります。多くの場合、このような症状は一時的なものです。2日以上経っても症状が改善されない場合は、皮膚科医に相談してください。

体毛の色が薄い場合は、思うような効果が得られない場合があります。

### 《お手入れ後のケア》

氷水で冷やしたタオルや保冷剤を使ってお肌をクールダウンし、化粧水などでお肌を保湿してください。

2週間程度お手入れした部位を日光にさらさないようにして、直射日光を避けるようにしてください。

- やけど・炎症の原因になる可能性があります。

# お手入れのしかた



必ず守る

電源を切り、コンセントから ACアダプタ、本体からジャックを抜いて、本体が冷えてからお手入れをおこなってください。



注意

●水をかけたり、水洗いをしない

→感電・故障の原因になります。

●アルカリ洗剤、クレンザー、漂白剤、シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞうきんなどを使用しない

■使用ごとに必ずお手入れをしてください。

## 本体 水洗いできません


●乾いた清潔な布で全体を拭き、照射面をとくに丁寧に拭いてください。

※表面の汚れが落ちない場合は、やわらかい布に中性洗剤を薄めた水を付けてよく絞り、汚れを拭き取ります。そのあと、洗剤や水分が残らないように、全体を乾いた布できれいに拭きます。



## VIOアタッチメント 水洗いできません


●乾いた清潔な布で全体を拭き、照射面をとくに丁寧に拭いてください。

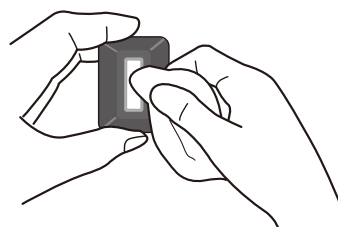

## ACアダプタ 水洗いできません

●乾いた清潔な布で全体を拭きます。

●電源プラグやジャック部分のゴミやホコリは、丁寧に取り除いてください。

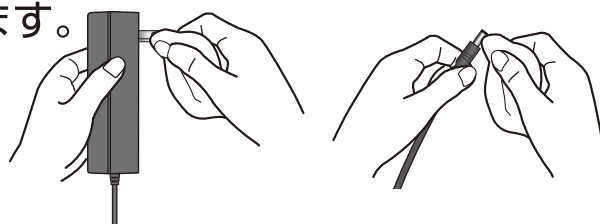

## よくある質問

**Q** サファイヤ冷却プレートがぬれている、照射後に肌がぬれた

**A** サファイヤ冷却プレートの結露です。拭き取って使用してください。

---

**Q** ジェルやクリームは不要ですか？

**A** 本製品は、乾いた肌への照射専用です。  
ジェルやクリームは使用しないでください。

---

**Q** 使用中、光りが熱く感じる

**A** 感じ方には個人差がありますが、除毛が不十分な場合は熱く感じやすくなります。

---

**Q** 照射したあと、焦げたニオイがする

**A** 発光してムダ毛に熱が加わったためで、異常ではありません。  
毛が伸びている場合は、除毛してください。  
肌に残った毛クズは、きれいに取り除いてください。

---

**Q** 使用中、照射した肌に赤みが出る

**A** 体質や体調によっては、照射することで肌が一時的に赤くなったり、痛みが生じることがあります。ただちに使用を中止し、肌を冷却・保湿してください。2日以内に症状が治まる場合は、症状が出ない照射レベルでご使用ください。2日経っても症状が続く場合は、皮膚科医に相談してください。

---

**Q** 照射された光りを見ても問題ありませんか？

**A** 光りを間接的に見ても、目に害はありませんが、直接目に対する照射は絶対におこなわないでください。  
まぶしい場合はサングラスを着用してください。

---

**Q** 肌の乾燥が気になる

**A** 化粧水などでお肌を保湿してください。  
※使用后、2日経っても炎症が続く場合には、皮膚科医に相談してください。

---

**Q** 照射部分に軽く圧迫感を感じる

**A** 肌に照射を安全かつ効率的におこなうための、構造上の特徴のため心配ありません。

---

**Q** 使用中に電源が切れてしまった

**A** 安全のため、使用しないまま約5分間放置すると、自動的に電源が切れます。また、電源を入れてから約30分経過すると自動的に電源が切れます。  
再度使用するときは、電源を入れて使用してください。

---

**Q** 毎日使用できますか？

**A** 同じ部位へ毎日照射することはできません。  
使用頻度の目安を守ってご使用ください。(8ページ参照)

---

**Q** 女性でも使用できますか？

**A** 女性でもご使用いただけます。

---

**Q** 指など照射ができない部位がある

**A** 接触面積の少ない部位や、湾曲が大きい部位には肌密着センサーがはたらき、照射できない可能性があります。  
照射面を肌に確実に密着させてください。

---

# 故障かな?と思ったら

●修理を依頼される前に、再度取扱説明書をお読みになり次の事項をチェックしてください。



**警告**

お客様ご自身で修理、改造することは絶対にしないでください。

こんなとき	お調べいただくこと・なおしかた
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ACアダプタがコンセントに確実に差し込まれていますか？</li> <li>●ジャックが本体のジャック差込口に確実に差し込まれていますか？ →2つを確実に差し込み直してください。</li> <li>●環境温度が約15℃～35℃の中で使用していますか？ →使用推奨温度外では動作しないことがあります。</li> <li>●照射ボタンに触れていませんか？ →照射ボタンを押さずに電源ボタンを長押ししてください。</li> </ul>
照射ボタンを押しても照射面が発光しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ランプの寿命が考えられます。 →新しいものをお買い求めください。 ※ランプの交換はできません。</li> <li>●照射面を肌に密着させていますか？ 《単発照射モード》 →液晶画面のモード（BODY、FACE、VIO）が点滅していないと、発光しません。 《連続照射モード》 →肌に近づけると自動で発光しますが、必ず肌に密着させて照射してください。</li> <li>●本体が熱くなっていませんか？ →電源を切り、本体の温度が下がってから使用してください。</li> </ul>
ボタンが反応しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●照射ボタンに触れていませんか？ →照射ボタンを押さずにボタンを操作してください。</li> </ul>
ファンの音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●冷却ファンの音ではありませんか？ →異常ではありません。</li> </ul>
照射レベル表示が点滅する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●しばらくすると使用可能 — 本体温度の上昇 →電源を切り、本体の温度が下がってから再度使用してください。</li> <li>●約10秒後に自動オフ</li> <li>●約20秒後に自動オフ</li> </ul> <p>— 本体内部の故障</p> <p>→修理はお買い上げの販売店またはお客様サポートセンターにご相談ください。</p>

## 製品仕様

定格電圧	： AC100～240V
定格周波数	： 50/60Hz
定格消費電力	： 68W
重量	： 約 532g (ACアダプタ含む)
サイズ	： 約 (幅)10.5×(奥行)4.6×(高さ)17.3cm
コード長	： 約 1.5m
照射回数	： 約 30万回
照射レベル設定	： 6段階
安全機能	： 肌密着センサー、オートオフ機能
オートオフ機能	： 電源を入れてから約30分、無操作時約5分
材質	： PC樹脂、ABS樹脂、ガラス
付属品	： ACアダプタ、サングラス、VIOアタッチメント
生産国	： 中国

- 本製品は医療機器ではありません。

### 保管のしかた

- 長期間保管される場合は、本体の汚れをしっかりと拭き取り、ちりやホコリがかからないように袋などに入れて保管してください。
- 直射日光の当たらない、高温多湿を避けた結露しない場所で保管してください。
- 振動のある場所や冷暖房機のそばは避けてください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。

### 廃棄のしかた

- 自治体のゴミの廃棄方法に従って廃棄してください。

販売元： **株式会社マンドム**

大阪府中央区十二軒町 5-12

輸入元： **MARUTAKA** (株式会社 丸隆)

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-62-3

《お客様サポートセンター》 TEL 0120-104-300

受付時間 10:00～17:00(土日 祝日を除く)

お問い合わせの際には、製品名・品番をお伝えください。

## 注意

本製品には目を守るための「肌密着センサー」を搭載しています。照射面が肌にピッタリと密着していない場合は、照射ボタンを押しても照射面が発光せず、光りが漏れてこない設計になっています。

ただし、連続照射モードのときは自動で発光するので、ご注意ください。



必ず守る

お手入れ前に必ず除毛してください。  
やけどのおそれがあります。



## ご使用前に

●安全にご使用いただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。


●ご使用前に、必ずご自身の肌の色を下記のスキンチャートと比較し、使用可能かどうかの確認をしてください。

※肌の色が暗い場合、光りの吸収が多いためやけどをするおそれがあります。

●初めて使用するときや、しばらく使用しなかったとき、照射レベルを上げるときは、使用する部位ごとに照射テストをおこなってください。(参照:取扱説明書P.8)

●その上で、必ずレベル1から使用して、肌に異常がない適切なレベルを確認してください。

※レベルを上げる際は1段階ずつ上げて、その都度照射テストを実施してください。

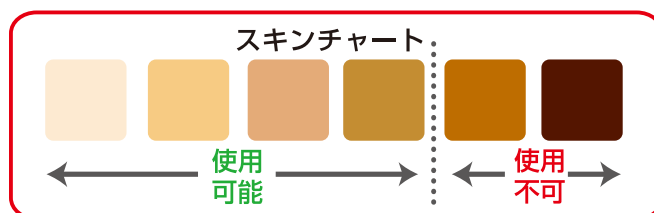

注意

肌に合ったレベルを設定してください。  
無理に高いレベルで使用すると、やけどや赤みの原因となります。

●お読みになった後は、取扱説明書に貼っていつでも確認できるよう、大切に保管してください。